

BOD測定用DOメーター

型式：B-100TA

新プログラム（Ver.1.0.0.6以降）追加機能説明書

製品付属の取扱説明書と一緒に保管し、参照してください。

ご案内の新プログラム（Ver.1.0.0.6）においては、主な機能として以下が追加されております。

- ①「DOプローブの追加と削除」ウィザード
- ②「取扱・メンテナンス動画」

お持ちの取扱説明書には上記機能について記載がありませんので、新プログラムをインストールした際は、本冊子をご参照のうえ、製品をご使用ください。

①DOプローブの追加と削除

- ・新しいDOプローブを増設する場合

"1.DOプローブの追加"を行ってください。

- ・DOプローブを修理・点検のために弊社に発送し、返却後、再度使用する場合
- ・DOプローブを別のDOプローブに交換する場合

"2.DOプローブの削除" → "1.DOプローブの追加"の順に行ってください。

1.DOプローブの追加方法

1. メニューバーの"設定(S)"をタップし、
"接続ウィザード..."を選択します。



2. **DOプローブの追加** をタップします。

3. 電源"OFF"状態のDOプローブのSTARTスイッチを1～2秒長押しします。


4. DOプローブのSTARTスイッチを"ON"状態にし、10秒以上長押しします。

- ・動作ランプが高速点滅（解除中リズム）します。
- ・高速点滅になったら、接続解除が完了です。

動作ランプの点滅状態の確認は、取扱説明書"動作ランプの点滅リズム"または"取扱・メンテナンス動画"（本冊子P4参照）から確認できます。

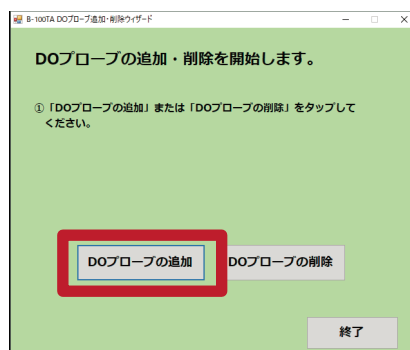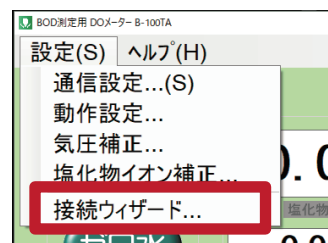

STARTスイッチ

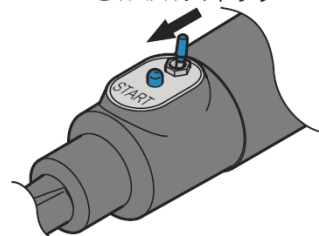


5. DOプローブの電源が入っていることを確認し、
をタップします。

次へ




6. 「DOプローブを接続しています。」と表示され自動的に
DOプローブを接続します。

30秒ほどお待ちください。

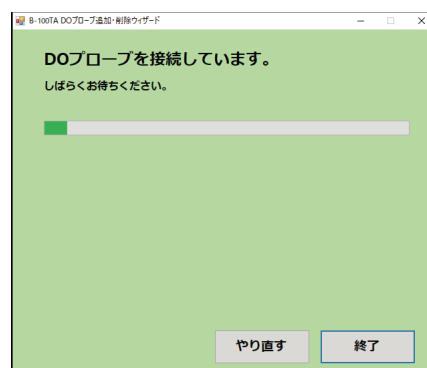


7. 追加するch番号をリストから選択し、
をタップします。


次へ

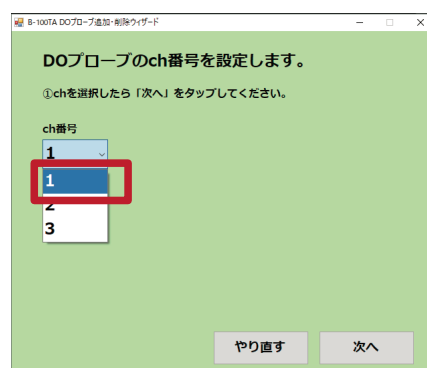

8. **終了** をタップして終了します。

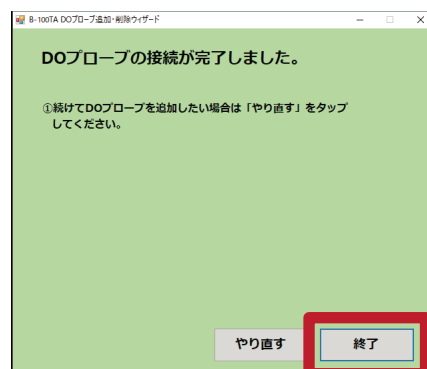


DOプローブの追加ができない場合はメッセージ画面が表示されます。
指示に従って操作をし直してください。

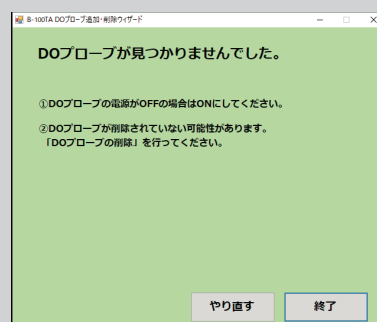


2. DOプローブの削除


1. メニューバーの“設定(S)”をタップし、“接続ウィザード...”を選択します。

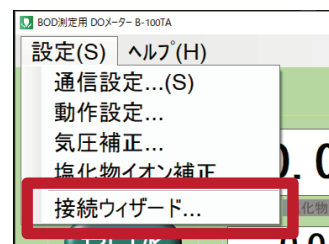


2. **DOプローブの削除** をタップします。

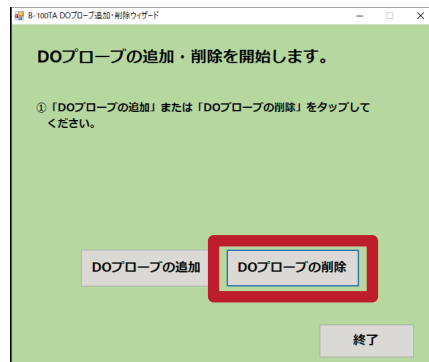


3. 削除したいDOプローブをチェックし **次へ** をタップします。

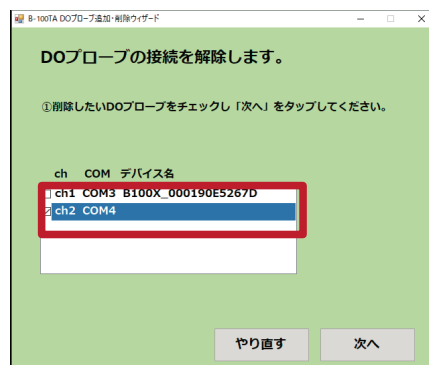

4. **終了** をタップして終了します。

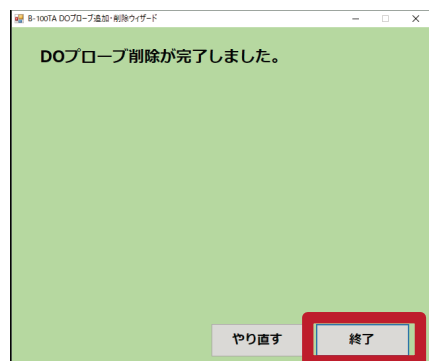

DOプローブの削除ができない場合はメッセージ画面が表示されます。
指示に従って操作をし直してください。

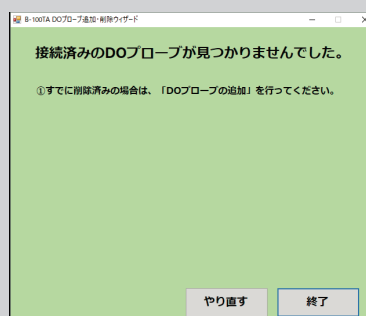


②取扱・メンテナンス動画


取扱・メンテナンス情報を動画で確認できます。操作・設定が分からないときにご利用ください。

取扱・メンテナンス動画の利用方法

1. メニューバーの“ヘルプ(H)”をクリックし、“取扱・メンテナンス動画...”を選択します。

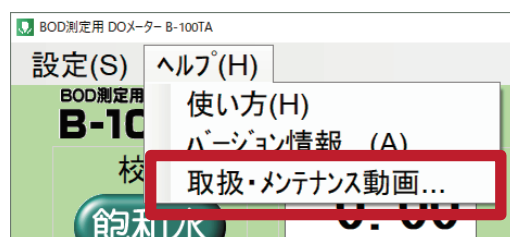

2. 確認したい内容の“動画を見る”をタップします。

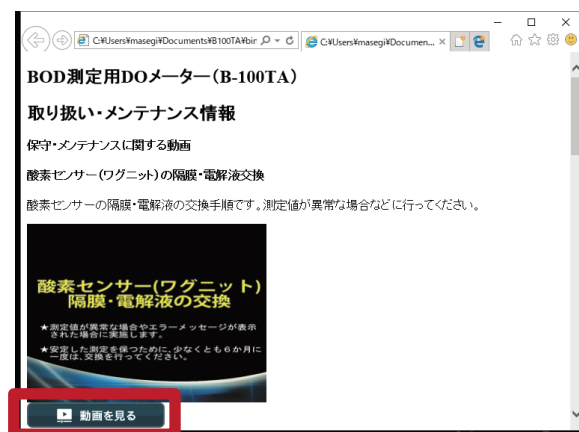

最新の取扱・メンテナンス情報については、弊社ホームページのBOD測定用DOメーター (B-100TA) の製品ページまたは「サービス・サポート」メニューの「取扱・メンテナンス情報」より、ご確認ください。

- ・ BOD測定用DOメーター (B-100TA) の製品ページ URL <http://www.iijima-e.co.jp/products/b100ta.html>
- ・ 取扱・メンテナンス情報ページ URL <http://www.iijima-e.co.jp/maintenance/b100btt.html>

 飯島電子工業株式会社

営業部 〒443-0011 愛知県蒲郡市豊岡町石田 1-1
TEL : 0120-67-2827 FAX : 0120-69-6814